



Technology in Practice™



## Q200/HE™

### Enregistreur numérique

COMBINAISON D'UN ENREGISTEUR HOLTER & D'ÉVÈNEMENT FIABLE ET PRÉCIS

SAISIE D'ÉVÈNEMENTS CARDIAQUES PROBLÉMATIQUES

CONCEPTION ERGONOMIQUE

# Technologie Holter avancée

Le Q200/HE™ est le premier enregistreur de l'industrie à combiner l'enregistrement Holter et l'enregistrement d'évènements. Le Q200/HE fait interface avec le logiciel Holter LX Analysis afin de capturer les évènements cardiaques problématiques, de fournir des analyses rapides et précises et offrir des rapports personnalisés. Il s'agit de la meilleure solution autant pour votre pratique que le client, une autre combinaison de choix!

## CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

**Enregistreur combiné :** Peut être déployé comment un enregistreur Holter de 14 jours ou un enregistreur d'évènements de 30 jours.

**Conception ergonomique :** Écran LCD large à visionnement facile, touches de fonction et interface d'utilisateur très simple, pour rendre cette unité exceptionnellement facile à utiliser.

**Capacité d'utiliser plusieurs langues :** Anglais, danois, finnois, français, allemand, italien, polonais, portugais et espagnol

**Faible coût, câbles dissimulés :** Les câbles de patient QRS offrent une meilleure intégrité de signal de même qu'une certaine immunité au bruit tandis que les coûts peu élevés réduisent les frais totaux de propriété.

**Précis et fiable :** Les renseignements du patient sont encodés sur une carte mémoire, aucune confusion quant aux renseignements ne peut donc se produire. Technologie numérique fiable utilisée pendant toute la durée de l'enregistrement afin d'accroître la durée de vie utile et réduire les coûts.

**Maximiser les remboursements :** Le Q200/HE permet le remboursement de «capture» de la terminologie procédurière actuelle permise pour l'enregistreur Holter et d'évènement. Au même moment, l'espace de stockage numérique amovible permet le redéploiement rapide de l'unité pour un autre patient.

## HOLTER LX ANALYSIS ET LX EVENT

- Le Q200/HE fait interface avec de nombreux niveaux de logiciels Holter LX Analysis, soit Basic, Enhanced, Enhanced Plus et Pro, chaque niveau étant conçu afin de traiter les divers besoins de nos clients. Consultez notre brochure pour le logiciel Holter LX Analysis afin de choisir le niveau qui vous convient.
- Le Q200/HE fait interface avec le logiciel LX Event qui offre la manière la plus complète et polyvalente de gérer les données d'ECG provenant d'enregistreurs d'évènements en boucle.
- Les logiciels Holter LX Analysis et LX Event proposent des rapports personnalisés, des analyses précises et sont disponibles dans plusieurs langues.



## CE QUI EST INCLUT

- Enregistreur Q200/HE
- Câbles à 5 électrodes pour le patient
- Manuel de l'utilisateur du Q200
- Guide de mise en place
- Pochette pour le moniteur et pince de ceinture
- Carte mémoire amovible
- Électrodes Holter
- Trousse de préparation du patient

## SPÉCIFICATIONS

**Durée d'enregistrement :** 14 jours avec une pile alcaline

**Largeur de bande de l'enregistrement :** 0,05 – 70 Hz

**Résolution :** 12 bit, 12,50 µV/LSB

**Taux d'échantillonnage :** 180 échantillons par seconde


**Options :** Versions disponibles en plusieurs langues

**Dimensions :** 8,6 X 6,0 X 2,0 cm

**Poids :** 99,3 grammes, incluant la pile  
(70,9 grammes sans)

**Alimentation :** 1 pile AA

**Capacité de stockage :** Carte SD Flash 32 Mo – 1 Go

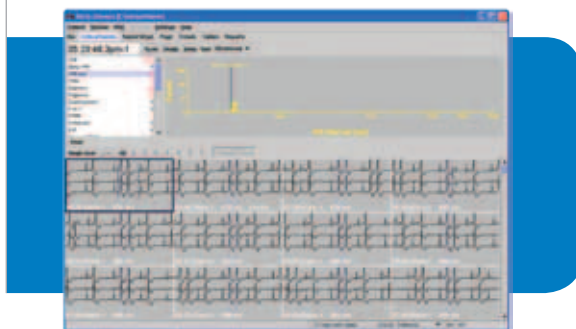

Technology in Practice™

6901 E. Fish Lake Road, Suite 188 | Maple Grove, MN USA 55369  
+1800465.8408 | +1.763.559.8492 | Fax +1.763.559.2961  
info@QRSdiagnostic.com | www.QRSdiagnostic.com



REF 700005-00

EC REP Advena Ltd  
33 Bridge St.  
Hereford HR4 9DQ  
UK

CE  
0086

ML302 02/2012